

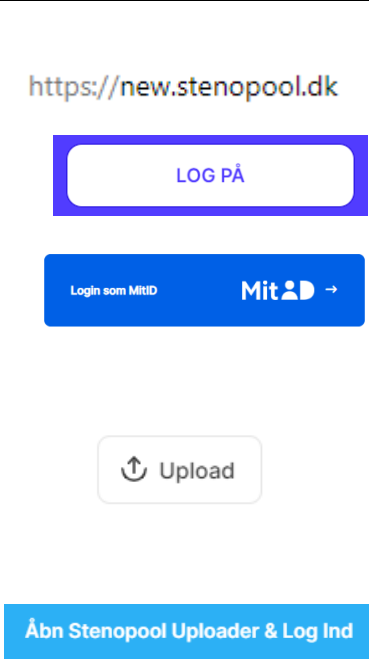
# SEND OG SE DINE DATA

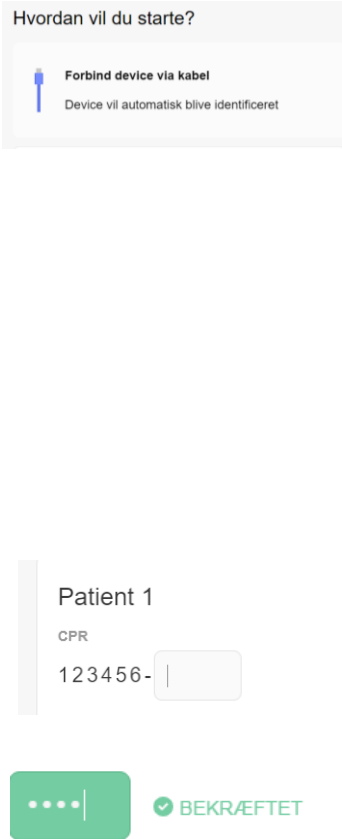
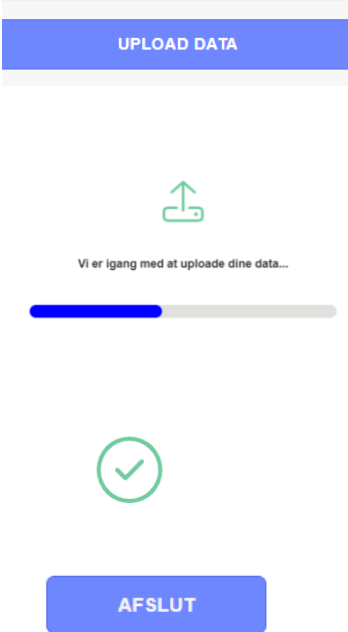
## Patient-manuel til Stenopool (med MitID) Version 5

### Sådan sender du dine data til Stenopool

#### Inden du uploader

- Denne manual retter sig primært mod upload af Tandem pumper
- Hav USB-kablet til din enhed klar. Hvis der ikke følger et kabel med enheden, kan du få det udleveret på Steno Diabetes Center.

| Handling            | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Illustration                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Log in på Stenopool | <p>Log ind på Stenopool på <a href="https://new.stenopool.dk/portal">https://new.stenopool.dk/portal</a></p> <p>Tryk på "Login"</p> <p>Log ind via MitID</p> <p>Tryk på "Upload" i bjælken øverst på skærmen.</p> <p>Start upload-programmet ved at trykke på knappen "Åbn Stenopool Uploader &amp; Log Ind"</p> | <p><a href="https://new.stenopool.dk">https://new.stenopool.dk</a></p>  |

| Handling        | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Illustration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forbind enheden | <p>Nu vises en side "Hvordan vil du starte?"</p> <p>Forbind din enhed til computeren via det tilhørende USB-kabel.</p> <p><b>OBS! For Caresens og Medtronic 6xx series og Omni-pod Dash se nedenfor.</b></p> <p>På siden ser du herefter set et billede af din enhed.</p> <p>Indtast nu de manglende cifre af dit personnummer i det tomme felt.</p> <p>Når cifrene er korrekt indtastet bliver feltet grønt.</p> |  <p>The screenshot shows a mobile app interface. At the top, it says 'Hvordan vil du starte?'. Below that, there's a section 'Forbind device via kabel' with a USB icon and the text 'Device vil automatisk blive identificeret'. Further down, there's a patient identification section with 'Patient 1' and 'CPR' followed by a text input field containing '123456-'. At the bottom, there's a green button with three dots and a green checkmark icon next to the text 'BEKRÆFTET'.</p> |
| Upload data     | <p>Tryk på "UPLOAD DATA" og data vil blive sendt fra din enhed til Stenopool.</p> <p>Mens dine data indsendes vises teksten "Vi er i gang med..."</p> <p>Når data er indsendt, vises det grønne flueben.</p> <p>Tryk nu på "Afslut"</p>                                                                                                                                                                           |  <p>The screenshot shows a mobile app interface for data upload. At the top, there's a blue button labeled 'UPLOAD DATA'. Below it, there's a green upload icon and the text 'Vi er igang med at uploade dine data...' above a progress bar. Further down, there's a green checkmark icon inside a circle. At the bottom, there's a blue button labeled 'AFSLUT'.</p>                                                                                                                      |

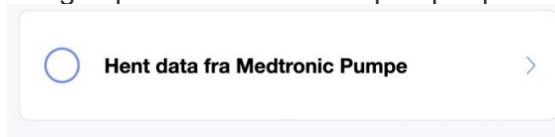
### **Caresens**

Den medfølgende ledning sætter du i på følgende måde

1. Hav den hvide ledning klar som følger med apparatet
2. Sæt den hvide ledning i blodsukkerapparatet mens enheden er slukket
3. Tryk på "S" og afvent at visningen ændres til "PC"
4. Sæt USB-stikket på den hvide ledning i USB-indgangen på computer
5. Indtast CPR når Stenopool beder om det

### **Medtronic 6xx series**

1. Indsæt blodsukkerapparat Contour Next link i USB-stik i computer
2. Find serienummer bag på pumpen eller inde på displayet\*
3. Vælg "Upload fra Medtronic pumpe" på Stenopool



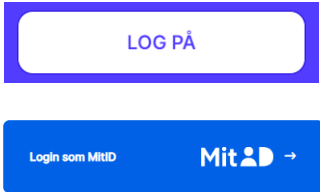
4. Følg anvisningerne på skærmen
5. Vær sikker på at pumpe er på "Forsiden" inden upload startes

- 
- \* a) Få markøren øverst op og tryk på knappen midt på pumpen  
b) Vælg status og/eller pumpe  
c) Rul ned til serienummer

### **Omnipod Dash**

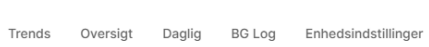
1. Tilslut den gule ledning til USB-stik på computer
2. Tænd og log på pumpen
3. Tilslut mini-USB til pumpen
4. Der må ikke tastes CPR endnu
5. Vælg "Eksporter" på pumpen og vent indtil at der står "udført"
6. Tast CPR i Stenopool

## Sådan kobler du din Dexcom-konto til Stenopool

| Handling                 | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Illustratio                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Log ind på Stenopool     | <p>Log ind på Stenopool på <a href="https://new.stenopool.dk/portal">https://new.stenopool.dk/portal</a></p> <p>Tryk på "Login"</p> <p>Log ind via MitID</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p><a href="https://new.stenopool.dk">https://new.stenopool.dk</a></p>  |
| Opret kobling til Dexcom | <p>Tryk på "Mere" i topbjælken</p> <p>Tryk nu på "Opsæt integration" i boksen med overskriften "DexcomAPI Integrationer"</p> <p>Herefter åbner Dexcoms platform. Godkend nu kobling til Stenopool.</p> <p>Dine data vil nu løbende blive overført til Stenopool, således at de altid er klar til en næste konsultation og så Steno Diabetes Center kan følge dine data, hvis I har aftalt dette.</p> | <p>Mere</p>                                                            |

## Sådan ser du dine data til Stenopool

- Du skal enten anvende webbrowseren Chrome eller Edge for at se dine data

| Handling             | Forklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Illustration                                                                                                                                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Log ind på Stenopool | <p>Log ind på Stenopool på <a href="https://new.stenopool.dk/portal">https://new.stenopool.dk/portal</a></p> <p>Tryk på "Login"</p> <p>Log ind via MitID</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><a href="https://new.stenopool.dk">https://new.stenopool.dk</a></p>  |
| Vælg skærmbillede    | <p>I Stenopool er en række sider, der på forskellige måder viser dine data.</p> <p>Du kan i topbjælken vælge imellem disse sider:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Oversigt"</li> <li>• "Daglig"</li> <li>• "BG log"</li> <li>• "Tendenser"</li> <li>• "Enhedsindstillinger"</li> </ul> <p>Snak med din behandler om hvad de forskellige sider viser og hvordan de kan være nyttige for dig.</p> |                                                                       |